




Standard Staining des mittleren Schneide- zahns in einem Brand



Workflow:

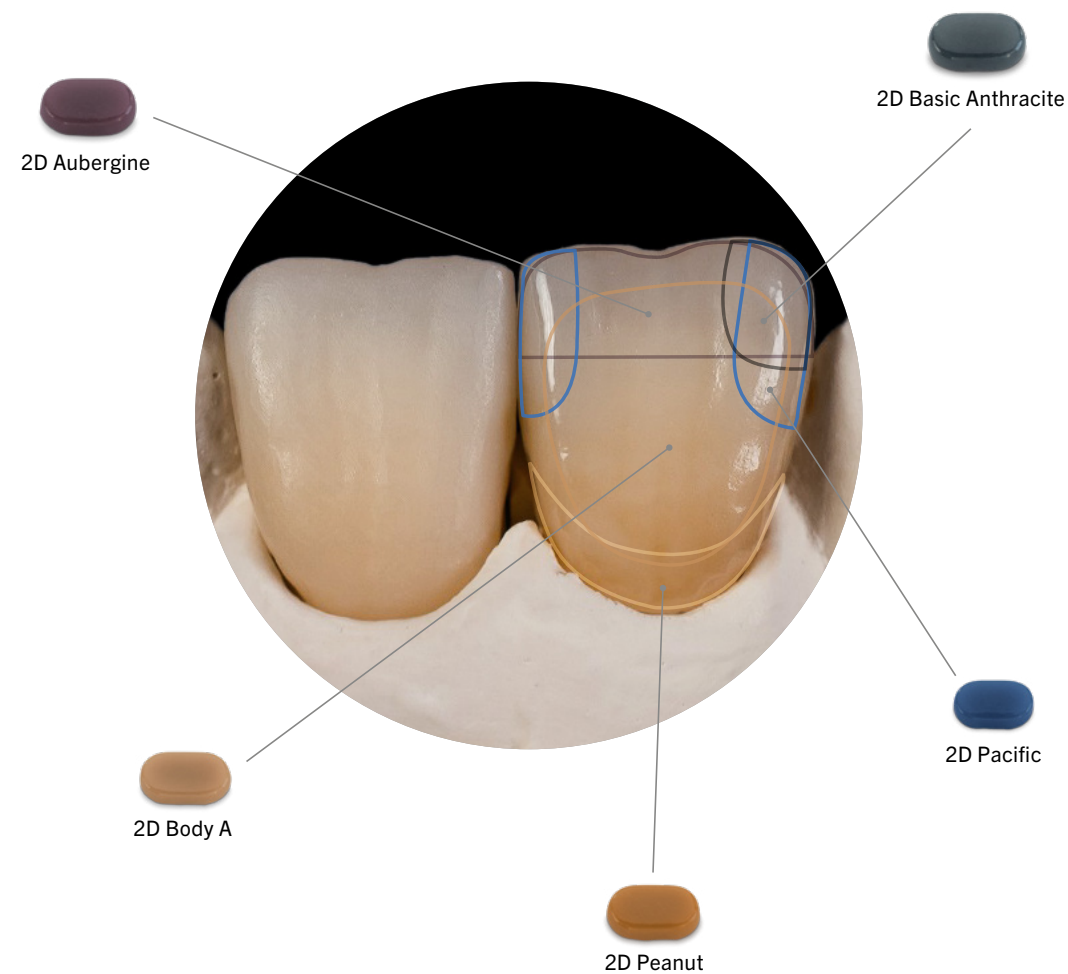


2D Bemalung
Weiße Ästhetik



Tutorial



1. Ausgangssituation: Monolithisches Multilayer-ZrO-Gerüst in A3 – bereit zur Individualisierung

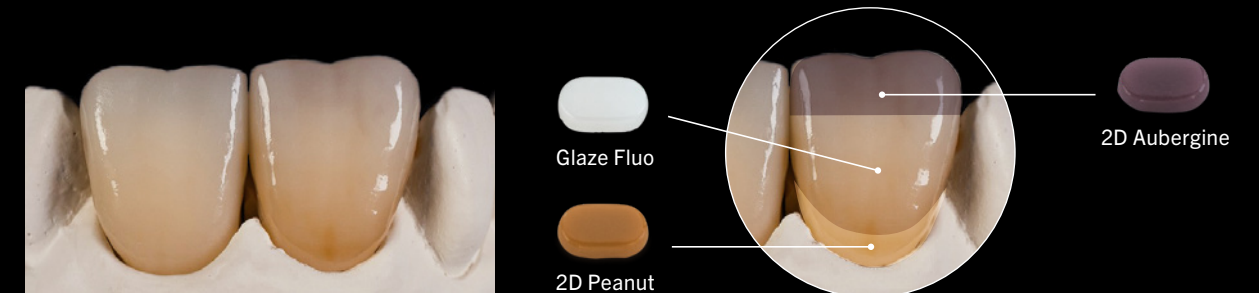

2. Oberfläche mit HeraCeram cre-active **Glaze Fluo** dünn benetzen. HeraCeram cre-active **2D Peanut** auftragen, um das Chroma im zervikalen Bereich zu verstärken. Durch HeraCeram cre-active **2D Aubergine** Transluzenzeffekte im Inzisalbereich erzeugen.



3. Verstärkung des Transluzenzeffekts: HeraCeram cre-active **2D Basic Anthracite** am distalen Rand auftragen und zur Inzisalkante hin verblenden. HeraCeram cre-active **2D Pacific** mesial und distal auftragen und zur Inzisalkante hin ausstreichen.



4. Bemalen des Body-Bereichs mit HeraCeram cre-active **2D Body A** zur Anpassung der Zahnfarbe gemäß Vita Classic Farbschlüssel*.

